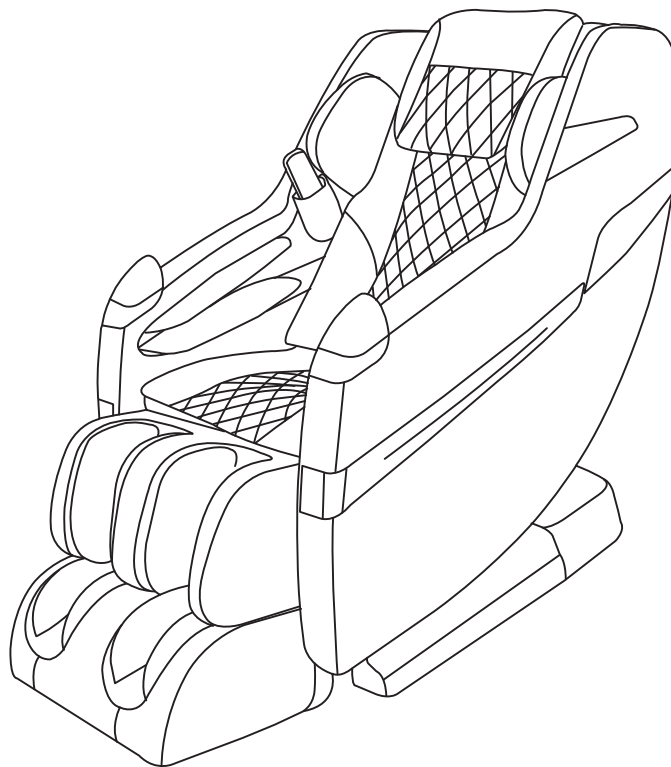




# SMARTJAZZ



Rev.1.0

Bruger manual  
OG 5570



OGAWA

**SMARTJAZZ**

Bruger manual

## Indhold

Sikkerhedsinstruktioner	2-3
Produkt dele	4
Flyt stolen	5
Fjernbetjening	6
Produkt guide	7-11
Funktioner	12
Rengøring og vedligehold	13
Spørgsmål og svar	14
Problemløsning	15-16
Specifikationer	17

# Sikkerhedsinstruktioner

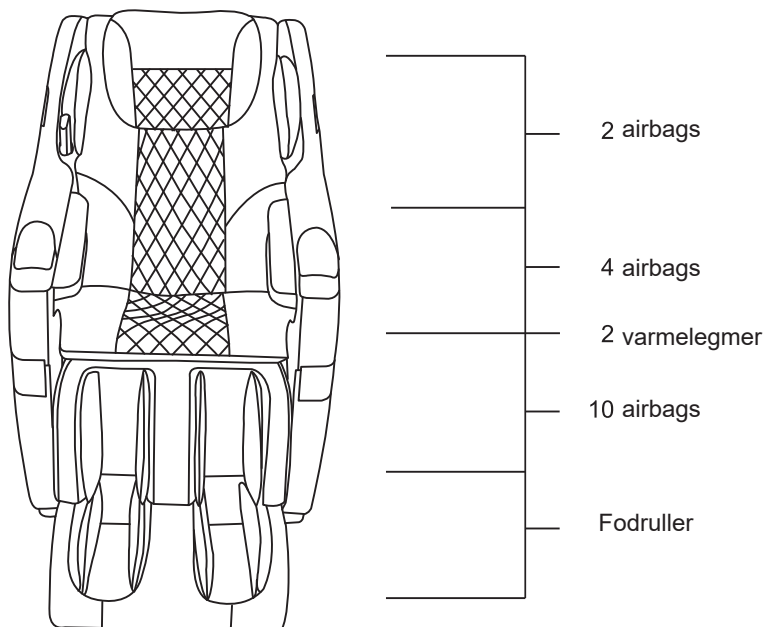
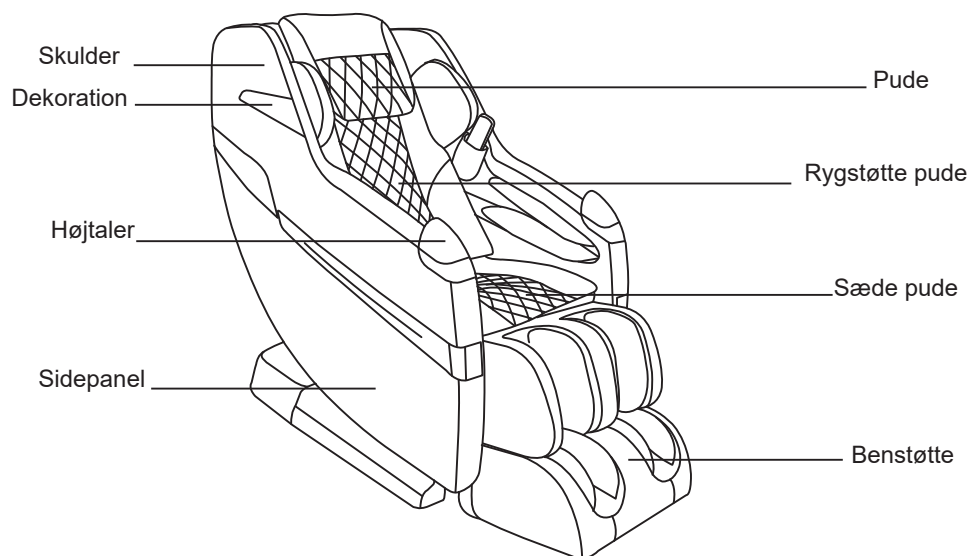
## Advarsel!

- Sørg for at stikket er sat ordentligt i stikkontakten før brug. Hvis den ikke sidder korrekt forøges risiko for stød.
- Konsulter med en kvalificeret elektriker eller service personale hvis du har nogen tvivl om at produktet sidder ordentligt i. Gør ikke selv nogle ændringer på det medfølgende stik. Hvis stikket ikke passer, få det da skiftet ud af en professionel elektriker.
- Når du benytter massagestolen, bør følgende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, for at mindske risiko for brand, brandskade, stød eller anden skade.
- Læs disse instrukser før brug:
- Sørg for massagestolens stik er forsvarligt sat i både stikkontakt o stol, for at undgå stød, kortslutning og brand.
- Sørg for altid at strømstikket ikke er sat til, når massagestolen ikke er i brug
- Brug ikke massagestolen steder med høj luftfugtighed
- Brug ikke massagestolen udendørs eller steder med direkte sollys
- Itilfælde af strømsvigt, så sluk massagestolen på kontakten på stolen, og træk stikket ud, så du undgår skade på stolen når strømmen vender tilbage
- Brug aldrig stolen hvis der er sket skade eller der er fugt på strømkablet
- Træk aldrig stikket ud hvis du har våde hænder
- Sørg for at der er konstant under overvågning, hvis stolen bruges af børn, handikappede eller invalide.
- Brug kun stolen som beskrevet i denne manual.
- Brug ikke andet tilbehør eller ekstraudstyr end produkter anbefalet af OGAWA
- Stå, sid eller hop ikke på benstøtten mens massagestolen er i brug
- Forsøg ikke at sidde eller stå på armlænet
- Vær forsigtig med at falde i søvn mens du bruger stolen.

## Sikkerhedsinstruktioner



- Hold massagestolen ren, og sørg for der ikke er fremmedobjekter i eller rundt om stolen.
- Flyt ikke på stolen ved at hive i strømkablet
- Sørg for der ikke er objekter, børn eller kæledyr bagved eller rundt om stolen under brug
- Sørg for der ikke er revner eller rifter i stolen før brug. Hvis der er sket skade på stolen, så brug den ikke. Kontakt din leverandør for reparationer
- Massagestolen er kun tiltænkt husholdbrug
- Hvis du har nogle lidelser, konsulter da lægen før brug.
- Hvis du har følgende tilstand eller lidelse, bør du konsultere din læge før brug:
  - Folk med ondartede tumor
  - Folk der lider af hjerte/kar sygdomme
  - Hvis du er gravid, menstrerer eller har barselsfeber
  - Folk der er sengeliggende
  - Hvis du er under nogen form for medicinsk behandling
  - Hvis du har ryglidelser eller hvis du har bygningsfejl på ryggraden
- Hvis du oplever smerter under brug, så stop massagen med det samme. Hvis du har lidt skade, eller oplever hævelser kontakt da din læge.
- Dette produkt er ment som en ikke-professionel behagelig massage, og skal ikke anvendes i stedet for medicinsk behandling
- Brug ikke massagestolen i mere end 30 minutter, og sørg for det samme område på kroppen ikke masseres mere en 15 min ad gangen. Overdrevent brug kan føre til overophedning af massagestolen, som kan slide på dens levetid.
- Brug ikke stolen i områder aerosoler fx ilt bliver administreret
- Lad ikke børn lege på massagestolen
- Lad ikke børn rengøre produkter uden supervision fra en voksen
- Hvis der sker skade på produktet, skal det tilses af en OGAWA godkendt leverandør
- Som en sikkerhedsforanstaltning, vil stolen stoppe med at arbejde, hvis den udsættes for stort eksternt pres. Hvis stolen stopper, så sluk for stolen og tænd den efter 10 sek. Dette er især gældende hvis brugeren vejer mere end 100 kg. Massagestolen har varme i særlige områder. Sørg for der er slukket for varme-funktionen hvis du har sensitiv hud.
- Personer under 8 år, med nedsat fysisk eller mental kapacitet eller med manglende viden og erfaring med massagestolen, bør være under opsyn under brug.

## Produkt dele



## Flyt stolen

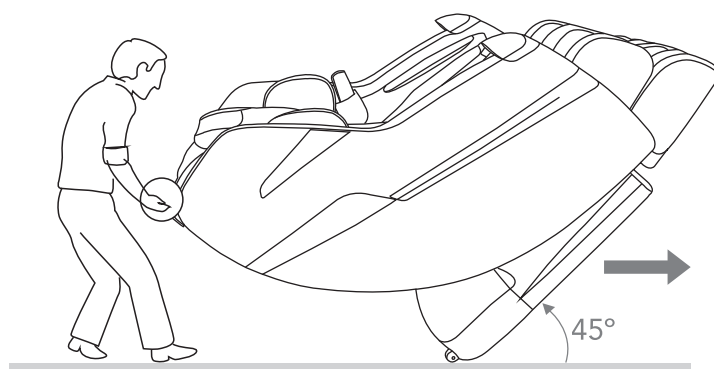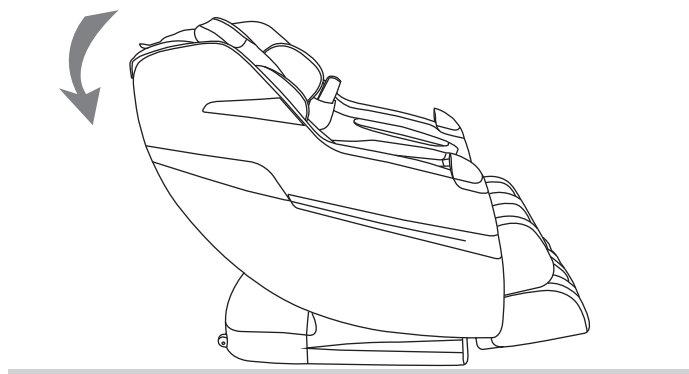Tryk ned på rygstøtten, og læn stolen ca. 45 grader tilbage, og flyt stolen rundt ved at skubbe stolen frem og tilbage ved hjælp af de små hjul i bunden.




### **Forsigtig:**

Sørg for fodstøtten er tilbage i sin oprindelige position før du flytter stolen.

Flyt ikke stolen mens nogen sidder i den

Placer en måtte eller tæppe under stolen mens du flytter den, for at undgå at ridse gulvet.

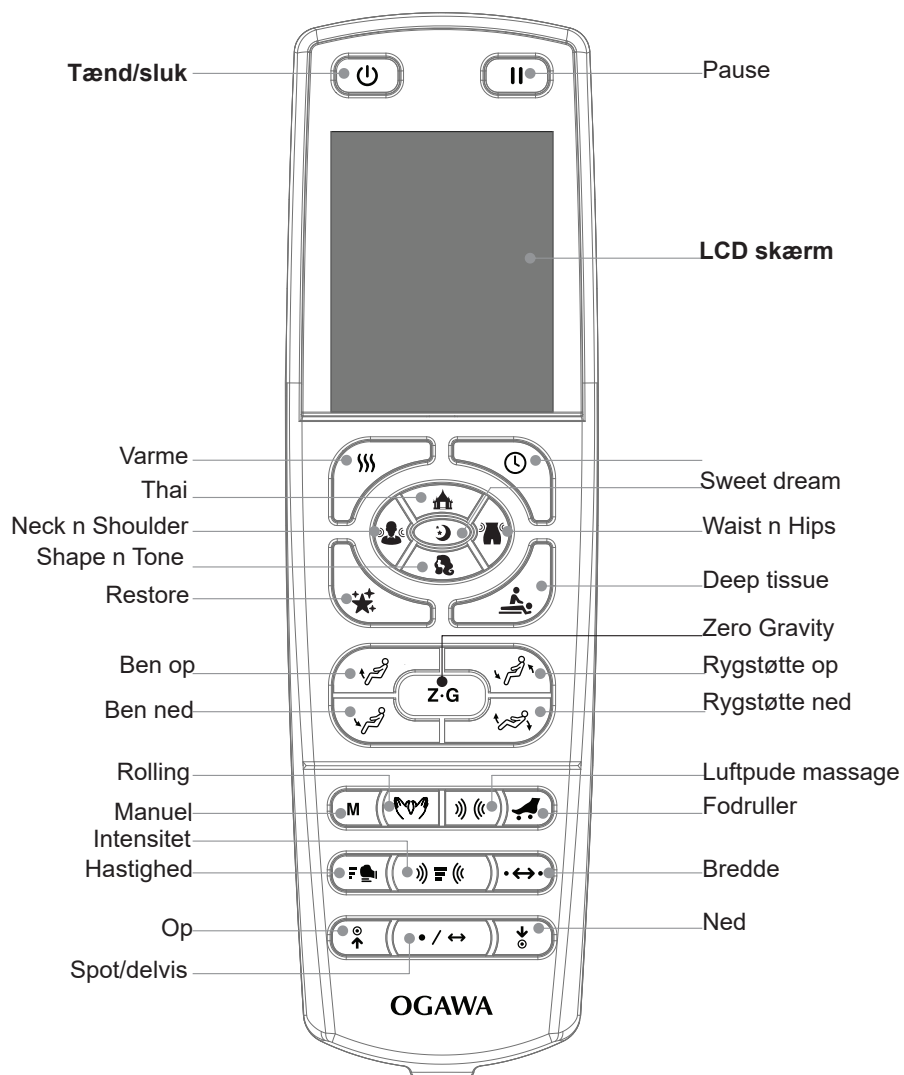
# Fjernbetjening





## Produkt guide

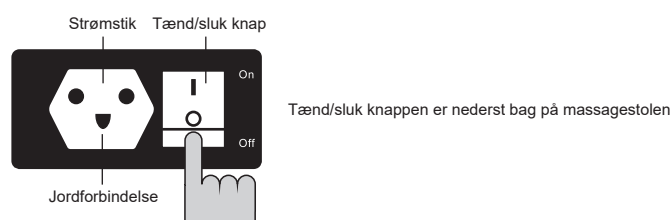1 Sæt strømstikket i kontakten, og sørg for kontakten på stolen står på tænd  
Sørg for strømkablet er tilsluttet massagestolen. Sæt strømkablet til strømstikket i væggen.  
Tænd for kontakten på stolen, så den peger mod I positionen.  
Massagestolen vil køre til sin standby position og være klar til brug.



2 Sæt dig i massagestolen, og tryk på 'ON/OFF' knappen, for at tænde stolen.  
Sæt dig i stolen, og tryk på ON/OFF knappen på fjernbetjeningen, som vil lyse når den er tændt.  
Tryk på et autoprogram for at begynde massagen. Tryk igen for at slukke massagestolen.



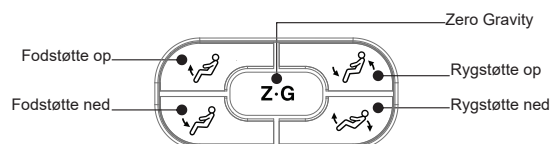
- \* I "ready mode" (klar position), vil stolen automatisk slukke efter 5 minutter hvis den ikke får noget input.
- \* { } Denne timer bruges til at vælge hvor lang tid massagen skal køre. Den er automatisk sat til 15 minutter, hver gang du trykker på knappen ændres tiden i følgende interval: 15>20>25>30>5>10>15.

3 indstil vinklen på benstøtte og ryglæn

\* tryk på denne knap for at indstille enten fodstøtte eller rygstøtte op eller ned

Slip knappen for når du har nået en komfortabel position

\* Tryk {Z-G} for at aktivere Zero Gravity positionen. Tryk igen for at slukke denne funktion



4 Stop massagen

Massagestolen vil automatisk slukke når den er færdig med sit program

Pause: tryk på II knappen for at stoppe midlertidigt og tryk igen for at genoptage massagen










## Produkt guide

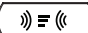
### 5 Begynd massagen Auto programmer

Restore, Deep Tissue, Neck n Shoulders, Waist n Hips, Sweet Dream, Thai, Shape n Tone

Auto massageprogrammerne inkluderer følgende teknikker:  
Shiatsu, Kneading, Tapping, Luftryksmassage

Knap	Navn	Funktion
	Restore	Fuldkorps massage, primært kneading og tapping. Fod- og rygstøtte vinkel kan rettes
	Deep tissue	Primært nakke, skulder og rygmassage + liv og haleben tapping. Fod- og rygstøtte vinkel kan rettes
	Neck n Shoulder	Primært nakke og skuldermassage + tapping og rulle. Fod- og rygstøtte vinkel kan rettes
	Waist n Hips	Primært massage ved livet og hofte + tapping + luftryksmassage. Fod- og rygstøtte vinkel kan rettes
	Sweet Dream	Langsom kneading massage + tapping og luftryksmassage. Fod- og rygstøtte vinkel kan rettes
	Thai	Primært ben og ryg stræk. Fod- og rygstøtte vinkel kan ikke rettes.
	Shape n Tone	Primært massage i sædeområdet kneading + tapping + airpressure. Fod- og rygstøtte vinkel kan rettes

\* Overstående massage er indstillet til 15 minutter, luftpudemassagen er middel intensitet.

Du kan styre intensiteten ved at trykke på 









\* Overstående massageprogrammer kan ikke rettes manuelt til.

# Produkt guide

## Manuel massage

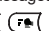
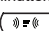
### Instruktion for manuel massage

Massagen kan manuelt indstilles til specifikke områder på kroppen



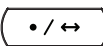

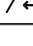



Knap	Navn	Funktion og indstillingsmuligheder
 Manuel	 Kneading	Tryk [M] for at aktivere massagemetoden. Hastighed kan ændres
	 Tapping	Tryk [M] x2 for at aktivere massagemetoden. Hastighed og bredde kan ændres
	 Kneading+Tapping	Tryk [M] x3 for at aktivere massagemetoden. Hastighed kan ændres
	 Clapping	Tryk [M] x4 for at aktivere massagemetoden. Hastighed og bredde kan ændres
	 Shiatsu	Tryk [M] x 5 for at aktivere massagemetoden. Tryk [M] x 6 for at stoppe.
 Rolling	Rolling massage	Tryk på [  ] for at aktivere

\* Ovenstående programmer kan ikke kobineres med andre programmer

\* Standart massagetid er sat til 15 minutter. Du kan indstille hastighed og bredde på massagen ved at trykke på knapperne

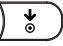Hastighed [  ] og Bredde [  ]





### Manuelle indstillinger

Knap	Navn	Funktion og indstillingsmuligheder
	Hastighed	Tryk for at vælge mellem 5 hastigheder
	Bredde	Tryk for at vælge mellem 3 bredder
	Spot/delvist	Tryk [  ] x1 for at aktivere spot massage Tryk [  ] x2 for at aktivere delvis massage Tryk [  ] x3 for at stoppe
	Op	Tryk for at flytte massagerullerne
	Ned	

# Produkt guide
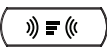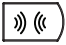
## Funktioner

Kan bruges både under manuel og automassage

Knap	Navn	Funktion
	Intensitet	Juster intensiteten på luftpudemassage Medium>høj>lav (cyklus)
	Luftpude massage	Luftpudemassage Skulder>hænder>ben>Fødder>hele kroppen>stop
	Fodruller	Sluk/tænd for fodruller
	Varme	Sluk /tænd for varme ved livet

Musik funktion

**For at spille musik:** Tænd for bluetooth på mobilen, og vælg massagestolen under bluetooth enheder. Efter parring med stolen kan du spille den ønskede musik fra mobilen  
Bluetooth password er "9999"

## Produkt guide

### **6. Sluk**

Tryk på ONN/OFF-knappen efter brug, og stolen vil slukke. Massagerullerne vil vende tilbage til deres standby position. Sluk for kontakten på stolen og hiv stikket ud af stikkontakten.

## Funktioner

OGAWA Massagestole er styret af en mikrocomputer som benytter forskellige intelligente massagemetoder og kombinationer såsom kneading, tapping, shiatsu, klapping, fodruller og luftpudemassage. Alle disse massagemetoder rammer præcist på de akupunkturpunkter der letter træthed, fremmer metabolisme og forbedre din blodcirkulation. Udstyret med en intelligent kropsscanner, sikrer stolen at den giver en tilfredsstillende massage af hele kroppen.

Forskellige typer af manuelle og autoprogrammer som passer til dine behov.

Stolen har en særlig skinne massagerullerne kører på, som er tilpasset til kroppens kurver, for er endnu mere præcis og effektiv massage.

- 1 Designet med henblik på kroppens kurver for en bedre massageoplevelse
- 2 Timer funktion som kan indstilles efter hvor lang tid du ønsker at blive masseret
- 3 LCD-display på fjernbetjening som giver en mere brugervenlig betjening af stolen
- 4 Stolen har en indbygget sensor der registrerer overophedning og overspænding for din sikkerhed.
- 5 Stolen er styret af en intelligent mikroprocessor som giver perfekt performance og kvalitet
- 6 Stolen har indbygget varme. Vær derfor forsigtig hvis du har følsom hud eller i områder med dårlig ventilation.

# Rengøring og vedligehold

## Rengøring af syntetisk læder

- Tør det syntetiske læder af med en tør, ren klud.
- Brug ikke kemikalier såsom alkohol, rensebenzin eller lignende.
- Følg altid anvisninger på rengøringsprodukterne du bruger.
- Hvis det syntetiske læder er meget beskidt, brug da følgende metode:
  - 1: Fugt en klud i vand med 3-5% neutralt vaskemiddel og varmt vand, og vrid kluden grundigt.
  - 2: Tør overfladen af det syntetiske læder med kluden.
  - 3: Tør af med en klud vredet op i rent vand.
  - 4: Tør efter med en tør klud.
  - 5: Lad overfladen lufttørre.



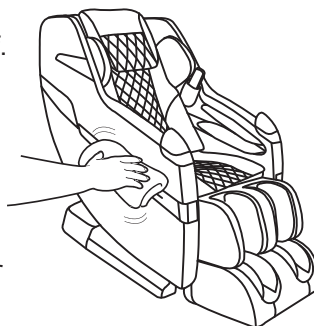
Hvis der er meget genstridige pletter, prøv da med en rengøringsvamp og neutralt rengøringsmiddel.

Syntetisk læder kan tage farve fra farvet stof. Vær derfor forsigtig med denim og stærkt farvet tøj.

Syntetisk læder kan miste farve. Hvis der er behov for at tørre stolen med en hårtørre eller lignende, bør du dække området med et håndklæde.

## Rengøring af plastik dele

1. Vrid en klud i vand med neutralt vaskemiddel og tør plastikdelene af.
  - Brug ikke produkter med kemikalier som alkohol, fortynder, rensebenzin eller lignende.
2. Tør af med en klud vredet i rent vand.
  - Sørg for den er vredet godt op, før du tørre fjernbetjeningen af.
3. Sørg for alle plastikdele lufttørre



# Spørgsmål og svar

## 1: Kan personer der ofte er på hospitalet pga. sygdom bruge dette produkt?

### Disse personer bør konsultere læge før brug.

Massage består af stimulering gennem tryk og berøring. Muskler vil være under kompression som en del af behandlingen, for at lindre spændinger og ømheder og fremme blodtilførsel i områderne. Visse typer og sygdomme og lidelser kan forværres af denne behandling. Derfor bør du søge konsultation hos en læge før du tager produktet i brug.

## 2: Er der krav til højde for at benytte dette produkt?

### Krav til højde er afhængig af kropstype. Se følgende forklaring:

Hvis en person er lavere end 145 cm og højere end 185 cm, kan det påvirke den øvre kropsmassage samt funktionen af benstøtte og fodruller. Dette kommer an på længden af din overkrop kontra længden af dine ben. I de fleste tilfælde vil dette kunne rettes ved at manuelt indstille skuldermassage og benstøtte, eller ved at have dine knæ let bøjet.

#### For høje personer

Prøv at køre fodstøtten længere ud og sæt skulderhøjden op

#### For lave personer

Prøv at køre fodstøtten op og sæt skulderhøjden ned.

## 3: Er der noget jeg bør være særlig opmærksom på, når stolen skal flyttes?

### Vær opmærksom på følgende:

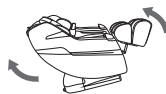
Læn stolen 45 grader tilbage og køр stolen frem på hjulene under stolen. Sid ikke i stolen mens den bliver flyttet. Før du flytter stolen:

① Tænd for stolen

② Tryk på 

Sørg for rygstøtten og benstøtten er fuld oprejst


③ Sluk for stolen igen og træk stikket ud af kontakten.



- Sørg for der ikke sker nogen skade på strømkablet. Sørg for kablet er samlet sammen, og ligger i sædet af stolen mens det flyttes. Sørg for kablet ikke kan falde på gulvet og lide skade mens stolen flyttes.
- Hvis den originale emballagekasse ikke er tilgængelig, kan du opbevare de øvrige emballagematerialer og pakke produktet i dem med dem for at undgå ridser og vibrationer under flytning.

## 4: Hvor sidder serienummeret på stolen?
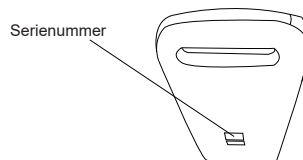
### Bag på rygstøtten



## 5: Der kommer lyde fra stolen når jeg bruger massagestolen

Lydene kommer fra den indre stuktur og er normale

## 6: Gør det noget at massagerullerne har forskellig intensitet

### Dette kan have noget at gøre med massageteknikken

For at stimulere en mere naturlig massageoplevelse er produktet designet til at bruge forskellige intensiteter og hastigheder som massagerullerne skifter mellem undermassagen. Dette er derfor en del af massageoplevelsen

## 7: Kompressionen er for voldsom


Du kan manuelt indstille intensiteten på luftryksmassagen.



## Problemløsning

Hvis du oplever en fejl, se da følgende liste og se om du kan løse problemet

Hvis problemet ikke løses, kontakt da din forhandler

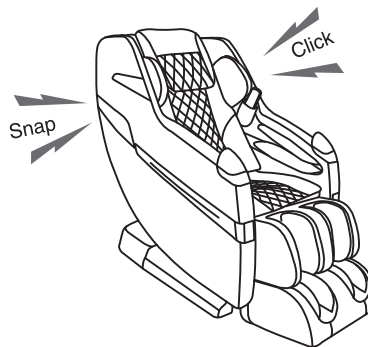
Problem	Mulig årsag / løsning
Massagerullerne stopper under massagen	Som en sikkerhedsforanstaltning kan massagerullerne stoppe, hvis der kommer for højt eksternt pres på massagerullerne. Sluk for stolen i 10 sek. og tænd for stolen igen, og se om det ikke løser problemet.
Produktet kan ikke lænes tilbage og benstøtten vil ikke køre frem/tilbage	Som en sikkerhedsforanstaltning vil produktet stoppe, hvis den oplever for stor modstand. Hvis knapperne på stolen blinker, så sluk for stolen og tænd igen efter 10 sek. Vær sikker på intet står i vejen for stolen.
Massagerullerne kan ikke nå mine skuldre eller nakke	Hvis massagerullerne ikke passer efter kropsscanningen, kan du manuelt ndstille så det passer til dine skuldre og nakke. Sørg for at være lænet helt tilbage i stolen under kropsscanningen.
Højre og venstre massage-rulle har ikke samme intensitet	Dette er en del af de forskellige massageteknikker, og er ikke en fejl.
Massagestolen vil ikke virke - Øvre krop massage - Benstøtte	<ul style="list-style-type: none"><li>● Strømmen er ikke sat ordentligt til</li><li>● Strømkontakten er ikke tændt</li><li>● Der er ikke valgt et program</li></ul>
Produktet køler ikke ned, selv efter varmfunktionen er slukket	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pga. varmfunktionen vil produktet føles varmt efter varmen er slukket.</li><li>● Hvis samme område konstant masseres, selv efter at varmfunktionen deaktiveret, vil du føle dig varmere</li></ul>
Produktet vil ikke tænde når man trykker på 	<ul style="list-style-type: none"><li>● Massagestolen vil slukke automatisk 5 sekunder efter end massage. Hold tænd knappen nede i 5 sek. Efter al bevægelse har stoppet.</li></ul>
Produktet er skadet	Kontakt forhandler.
Strømkablet eller stik er abnormt varmt	Kontakt forhandler.

## Problemløsning

Du vil høre følgende lyde og føle følgende fra produktet under massagen.

### Disse er ikke unormale og er en del af produktets struktur

- Lyden af massagestolen strækker sig
- Lyden og følelsen af massagerullerne der kører mod stoffet
- Friktionslyde mellem massagerullerne og rygstøtte
- Lyde af mekaniske dele der kører op.
- Motorlyde
- Lyde fra massagerullerne når de strækker sig
- Friktionslyde mellem armstøtten og rygstøtten når stolen læner sig tilbage
- Lyde fra luftpumpen når stolens airbags pustes op med luft
- Lyde fra luftpumpen når stolens airbags tømmes for luft
- Lyde fra magnetventilen i bunden af produktet
- Lyde når benstøtten flytter sig
- Lyde når skuldrestykket flyttes
- Lyde fra Airbags
- Lyde når fodrullerne rykker sig
- Friktionslyde mellem rygstøtten og puden når stolen tilbagelænes.



#### Advarsel

- Prøv ikke selv at udfører reparationer på produktet. Dette er for der ikke sker unødige uheld eller skade.

#### Advarsel

- I tilfælde af nogen former for anormalitet eller fejl bør du ikke tage stolen i brug. Sluk for stolen og træk stikket ud.  
Eksempler på anomaliteter eller fejl
  - Produktet tænder ikke selvom stikket sidder ordentligt i og kontakten er tændt
  - Der kommer en brændt lugt mens produktet er i brug
  - Produktet har deformiteter eller abnormt høj varme--> Forekommer der fejl, kontakt da forhandleren.

## Specifikationer

- Strømforbrug: 150W
- Automatisk sluk: Efter endt massage (standard 15 min.)
- Dimensioner oprejst: HxBxL: 152x78,5x117,5 cm
- Dimensioner liggende: HxBxL: 193,5x78,5x102,5 cm
- Vægt: 105 kg
- Dimensioner af pakke: Stol: 142x82x1235, Fodstøtte:  
53x44x51 cm
- Optimale forhold: 0~35 grader, 20%~80% luftfugtighed
- Opbevarings forhold: -5~35 grader, 20%~80% luftfugtighed
- Max vægt af bruger: ca. 120 kg.

For brugere over 110 kg. kan stoffet på stolen blive slidt hurtigere.